

# Cateter con Reservorio




## CUIDADOS

- PUNCIÓN SOLO CON AGUJAS TIPO HUBBER.
- EXISTEN DISTINTOS TAMAÑOS DE GRIPPER (CALIBRExLARGO)

● 20 X 19	● 22 X 16
20 X 25	22 X 19
	22 X 25
	22 X 32

DECIDIR EN BASE A TEJIDO SUBCUTÁNEO DEL PACIENTE Y ALTURA DE CATÉTER.

- UTILIZAR SOLO JERINGAS DE 10 CC O MÁS
- AL RETIRAR GRIPPER, DEJAR HEPARINIZADO CON 125 UI (EN 5ML EN JERINGA DE 10 ML)

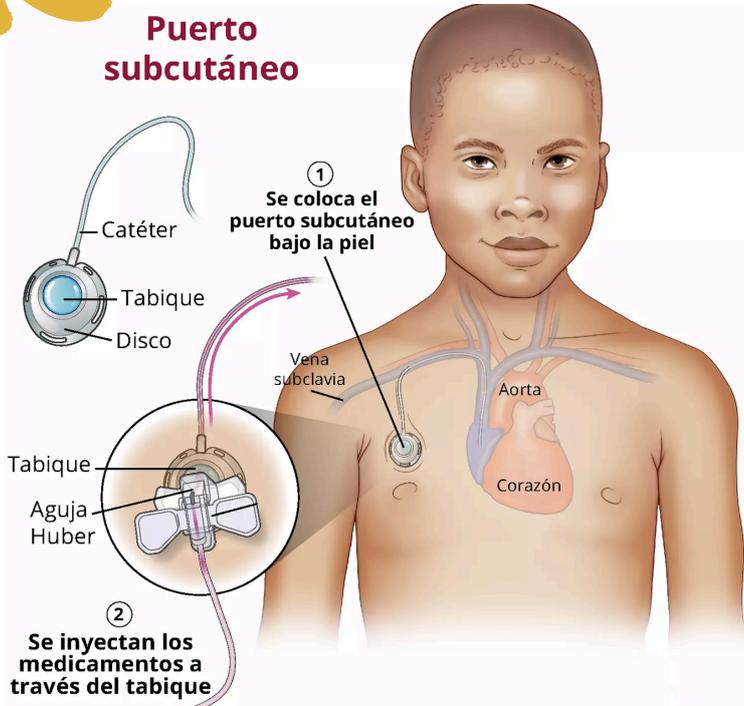

## ABORDAJE

- ✿ Reunir insumos para abordar catéter venoso con reservorio
- ✿ Lavado clínico de manos
- ✿ Realizar aseo de la piel con jabón de clorhexidina + agua bidestilada
- ✿ Presentar insumos a operador. Enfermera debe realizar desinfección de la piel con clorhexidina 2% y esperar 3 minutos. Luego preparar material (cebar gripper).
- ✿ Realizar abordaje de catéter venoso con reservorio con gripper cebado, sosteniendo fijamente el dispositivo con una mano.
- ✿ Comprobar retorno venoso, infundir para evaluar permeabilidad con JERINGAS DE 10 ML. En caso de toma de exámenes ELIMINAR primeros 5 ml.
- ✿ Cerrar circuito con válvula antireflujo
- ✿ Una vez corroborado retirar sello (blanco) y fijar con apósito transparente.
- ✿ Identificar con fecha, responsable de instalación y número de gripper.